

UPUTE ZA UPORABU

ULTRASTOP pro med. Otopina monodoza

sredstvo protiv zamagljivanja

SVOJSTVA

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo protiv zamagljivanja namijenjeno za primjenu na medicinskim optičkim instrumentima.

ULTRASTOP pro med. pouzdano sprečava zamagljivanje površina na medicinskim optičkim instrumentima. Posebna kombinacija površinski aktivnih tvari na tretiranim površinama stvara bistar i proziran sloj. Zahvaljujući tom vrlo tankom filmu sprečava se stvaranje kapljica i zamagljivanje površine zbog kondenzacije vodene pare.

SASTAV

ULTRASTOP pro med. sadrži kombinaciju površinski aktivnih tvari u alkoholno-vodenoj matrici (etanol, pročišćena voda, < 5 % površinski aktivnih tvari).

Jedna monodoza sadrži 5 ml.

PODRUČJA PRIMJENE

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo protiv zamagljivanja namijenjeno za primjenu na medicinskim optičkim instrumentima. ULTRASTOP pro med. prije svega je namijenjen za:

- primjenu na području **strogo aseptičke endoskopije**, koja se provodi s pomoću sterilnih uređaja u šupljim organima i tjelesnim šupljinama (npr. laparoskopija, torakoskopija, artroskopija itd.) te
- za medicinska dijagnostička ogledala i optičke instrumente (npr. ogledala za larinks i epifarinks, stroboskopi, dentalna ogledala, kolonoskopi itd.).

UPUTE ZA PRIMJENU

ULTRASTOP pro med. je predviđen za stručnu primjenu medicinskog osoblja.

- **Strogo aseptička uporaba**

Vrećicu otvorite na perforaciji na rubu ako je nužno; bočica tako može ostati sterilna. Sadržaj bočice nemojte rabiti ako je poklopac oštećen s obzirom na to da u tom slučaju sterilnost otopine više nije sasvim zajamčena.

Nije namijenjeno za višekratnu uporabu! Sadržaj otvorene bočice treba odmah iskoristiti!

- **Nanošenje otopine**

Primjena na ručnim instrumentima (npr. stroboskopi, ručni endoskopi itd.):

Otvorite ULTRASTOP pro med. bočicu tako da odvrnete poklopac, a sadržaj ispraznite na primjerenu podlogu. Kako biste navlažili optički element ručnog instrumenta, okrećite ga navlaženom spužvicom. Ostavite neka kratko djeluje i prema potrebi nakon što ispari nježno ispolirajte površinu sterilnom gazom koja ne ostavlja tragove vlakna.

Primjena na samostojećim uređajima, koji su fiksno montirani ili se teško pomiču:

ULTRASTOP pro med. bočicu otvorite tako da odvrnete poklopac, a sadržaj ispraznite na sterilnu gauzu koja ne ostavlja tragove vlakna. S navlaženom gazom temeljito namočite površinu koju tretirate. Ostavite neka kratko djeluje i prema potrebi nakon što ispari nježno ispolirajte površinu sterilnom gazom koja ne ostavlja tragove vlakna.

Pri pravilnoj uporabi ULTRASTOP pro med. ne ostavlja mrlje, međutim ako se nanese u predebelom sloju, površine izgledaju malo mutno. U tom slučaju preporučujemo čišćenje površine destiliranom vodom ili sterilnom gazom. Nakon toga ponovite opisani postupak.

- **Vrijeme zadržavanja proizvoda na površini i količina proizvoda za primjenu**

Vrijeme zadržavanja proizvoda na površini može se jako razlikovati ovisno o uređajima koji se koriste, tjelesnim šupljinama koje se tretiraju, eventualnim onečišćenjima leće zbog djelovanja krvi ili tkiva.

Proizvod se uz pridržavanje navedenih uputa za primjenu tijekom zahvata/pretrage može primjenjivati neograničeno.

POSEBNE UPUTE ZA SIGURNU PRIMJENU

ULTRASTOP pro med. je prikladan isključivo za primjenu na staklu i plastičnim materijalima. Ako se na materijalu već nalazi neki sloj ili postoji sumnja glede postojanosti materijala, obratite se proizvođaču ili distributeru predmetnog instrumenta.

UPOZORENJA

- Nije namijenjeno za injekcije! Lako zapaljivo!
- Čuvati izvan doseg djece!

UPUTE ZA SKLADIŠTENJE

- Ne skladištiti pri temperaturama višim od 25 °C.
- Zaštititi od svjetlosti.

ROK TRAJANJA

ULTRASTOP pro med. se pri pravilnom skladištenju može upotrebljavati do roka navedenog na kartonskoj ambalaži i etiketi. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan u navedenom mjesecu.

Rok trajanja nakon otvaranja:

Nije namijenjeno za višekratnu uporabu! Sadržaj otvorene bočice treba odmah iskoristiti!









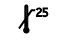


DOSTUPNI OBLICI NA TRŽIŠTU

ULTRASTOP pro med. otopina, 30 ml prozirna bočica

ULTRASTOP pro med. otopina monodoza: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. otopina monodoza (Clinic)

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Značenje simbola koji se nalaze na etiketi bočice i kutijici ambalaže je sljedeće:

	Proizvođač		Broj artikla
	Oznaka serije		Upotrebljivo do
	Pridržavajte se uputa za uporabu!		Sterilizirano aseptičkim postupkom
	Ne upotrebljavati ako je ambalaža oštećena		Nije namijenjeno za višekratnu uporabu!
	Ne skladištiti pri temperaturama višim od 25 °C		Zaštititi od svjetlosti
	Nije namijenjeno za injekcije! Lako zapaljivo!		

Proizvođač: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Beč – AT

Distribucija: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Beč – AT

Stanje informacija: rujan 2021.

