

BRUGSANVISNING

ULTRASTOP pro med. Løsning

Antidugmiddel

EGENSKABER

ULTRASTOP pro med. er et sterilt antidugmiddel til medicinske optiker. ULTRASTOP pro med. forhindrer pålideligt tildugning af medicinske optiker. En speciel blanding af overfladeaktive substanser danner et klart og transparent lag på de behandlede overflader. Denne meget tynde film gør, at dannelse af mikrodråber og dermed tildugning af overfladen forhindres af kondenseret vanddamp.

BESTANDELE

ULTRASTOP pro med. indeholder en kombination af overfladeaktive substanser i en alkoholisk-vandigt matrice (ethanol, rensed vand, < 5 % overfladeaktiver substanser).

ANVENDELSESOMRÅDER

ULTRASTOP pro med. er et sterilt antidugmiddel til medicinske optiker. ULTRASTOP pro med. er særligt godt egnet til:

- brug inden for strengt aseptisk endoskopi, som skal udføres med sterile redskaber i hulrumsorganer og hulrum i kroppen (fx laparoskopi, thorakoskopi, arthroskopi osv.); samt til
- medicinske undersøgelsespejle og optiker (larynx- og oropharynxspejle, stroboskoper, tandlægespejle, koloskoper osv.).

VEJLEDNING I ANVENDELSE

ULTRASTOP pro med. er lavet til brug af medicinsk fagpersonale.

- **Strengt aseptisk brug**

Anvend ikke flaskens indhold, hvis beskyttelsesringen rundt om gummiproppen er beskadiget før første brug, i så fald er opløsningen muligvis ikke længere steril!

- **Udtagning af opløsningen**

Aluminiumskappen og gummiproppen (latexfri) skal desinficeres med alkoholisk desinfektionsmiddel før og efter hver brug. Brug kun sterile sprøjter til udtagning. Nålen må ikke efterlades i gummiproppen! Efter steril udtagning skal hele indholdet være brugt inden for 4 uger. Vær opmærksom på opbevaringsanvisningerne!

Alternativt kan opløsningen tages ud ved at åbne gummiproppen. For at gøre det skal aluminiumsbeskyttelsesringen rundt om gummiproppen fjernes. Aluminiumskappen skal åbnes og fjernes forsigtigt for at undgå fare for snitsår på hånden!

Hvis ULTRASTOP pro med. er blevet udtaget på denne måde, skal opløsningen anvendes umiddelbart efterfølgende, og rester af opløsningen, som ikke er udtaget, kasseres.

- **Påføring af opløsningen**

Påfør en lille mængde ULTRASTOP pro med. på den desinficerede hhv. steriliserede overflade, og fordel det jævnt. Det gøres enten direkte eller ved hjælp af sterile gaze, der er blevet fugtet med ULTRASTOP pro med. Lad det virke kort, og poler i givet fald efter med steril gaze, der ikke efterlader fibre.

ULTRASTOP pro med. fedter ikke, hvis det bruges korrekt, men kan dog se lidt grumset ud, hvis det påføres overfladen i et for tykt lag. I så fald anbefales det at rengøre overfladen med destilleret vand eller steril gaze og give en ny behandling, som beskrevet ovenfor.

- **Hæftetid og anvendelsesmængde**

Hæftetiden kan variere meget afhængigt af de anvendte redskaber, det behandlede kropshulrum, en eventuel tilsmudsning af linse fra blod eller væv. Man kan anvende produktet, så ofte man ønsker under indgrebet/undersøgelse, hvis den anførte anvendelsesvejledning.

SÆRLIGE INFORMATIONER OM SIKKER ANVENDELSE

ULTRASTOP pro med. er egnet til brug på glas og kunststoffer. Hvis materialerne allerede er belagte, eller der er tvivl om et materiales bestandighed, skal du henvende dig til producenten eller forhandleren af den genstand, som skal behandles.

ADVARSELSINFORMATIONER

- Må ikke injiceres! Let antændelig!
- Opbevares utilgængeligt for børn!

OPBEVARINGSANVISNINGER

- Må ikke opbevares over 25 °C.
- Skal beskyttes mod lys.
- Flasken skal opbevares opretstående.

HOLDBARHED

ULTRASTOP pro med. er ved korrekt opbevaring holdbar indtil den forfaldsdato, som er angivet på foldeæskens og etiketten. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Holdbarhed efter åbning:

Efter steril udtagning skal hele flaskens indhold være brugt inden for 4 uger. Vær opmærksom på opbevaringsanvisningerne!

Hvis gummiproppen er blevet åbnet, skal opløsningen anvendes umiddelbart efter, og rester af opløsning, som ikke er blevet udtaget, skal kasseres.









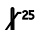

HANDELSFORMER

ULTRASTOP pro med. Opløsning, 30 ml gennemstiksflaske

ULTRASTOP pro med. Opløsning enkelt dosis: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Opløsning enkelt dosis (klinik)

YDERLIGERE VIGTIGE INFORMATIONER

Symbolerne, som er angivet på flaskens etiket og pakke, har følgende betydning:

	Producent		Varenummer
	Parti		Holdbar til
	Følg brugsanvisningen!		Steriliseret med aseptisk metode
	Må ikke anvendes med skadet emballage		Må ikke injiceres! Let antændelig!
	Må ikke opbevares over 25 °C		Skal beskyttes mod lys

Producent: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT

Distribution: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT

Information opdateret: September 2021

 0123

